

essentiel 

Embellisseur de pieds

EPP 1 RITA



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.

Nous espérons que ce set manucure-pédicure vous donnera entière satisfaction.

consignes d'usage

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir les consulter lorsque vous en aurez besoin.

Usage

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et à l'intérieur. Tout autre usage (médical, professionnel, commercial, etc.) est exclu.
- N'utilisez jamais l'appareil pour une autre fonction que celle pour laquelle il est destiné.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes manquant d'expérience et de connaissances ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont été formées et encadrées quant à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et connaissent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être faits par des enfants à moins qu'ils ne soient âgés de 8 ans et plus et surveillés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Tenir l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans lorsque l'appareil fonctionne.

- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- N'utilisez jamais des accessoires ou adaptateurs secteur non recommandés, spécifiquement tout accessoire ou adaptateur non fourni avec votre appareil.
- Arrêtez toujours l'appareil (bouton marche/arrêt sur la position « 0 ») lors d'un changement d'accessoire.
- Pour des raisons d'hygiène, cet appareil ne doit être utilisé que par une seule personne.
- Lorsque vous installez un accessoire, veillez toujours à ce qu'il soit bien enclenché.
- Les personnes souffrants d'hypersensibilité, d'insensibilité ou autre déficience sensorielle doivent faire attention lors de son utilisation.
- Si vous souffrez de diabète ou de toute autre maladie sensorielle, demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil sur un enfant, une personne invalide, endormie ou inconsciente, ou souffrant d'une mauvaise circulation sanguine.
- En cas de gêne durant l'utilisation de l'appareil, arrêtez la séance et consultez votre médecin.

- N'utilisez pas l'appareil sur toute zone du corps enflée, brûlée ou souffrant d'une inflammation, en cas d'éruption cutanée ou de plaie ulcérée, ou sur toute zone comportant des cicatrices récentes sans accord préalable de votre médecin.
- N'utilisez pas l'appareil sur les animaux.

Précautions liées au risque d'électrocution

- Débranchez toujours l'adaptateur secteur de la prise de courant lorsque vous n'utilisez pas l'appareil ou lorsque vous le nettoyez.
- Cet appareil est conçu pour fonctionner à basse tension de sécurité. Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- Ne cherchez jamais à récupérer un appareil électrique branché tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement et faites-le contrôler par le service après-vente de votre magasin revendeur avant toute tentative de le rebrancher.
- MISE EN GARDE : Maintenez l'appareil au sec.
- N'utilisez jamais l'appareil pendant un bain ou une douche.
- Ne rangez jamais l'appareil près d'un point d'eau, un évier ou une baignoire.

- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez jamais l'appareil sous la pluie ou dans un milieu humide.
- N'utilisez jamais l'appareil si les fils électriques sont dénudés ou endommagés.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau du bloc d'alimentation, des prises de courant, et au point de raccordement de l'appareil.
- Veillez à maintenir l'appareil et l'adaptateur secteur éloignés des surfaces chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si le cordon ou le bloc d'alimentation est endommagé,
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a subi des chocs ou détériorations,
 - s'il est tombé dans l'eau.
- Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.

Tri sélectif de la batterie



La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Avant de jeter définitivement cet appareil, la batterie rechargeable doit être retirée.

Ne jetez pas la batterie ou l'appareil avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de l'appareil et de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-la dans les bacs de collecte prévus à cet effet ou rapportez-la dans votre magasin.

- Ne jamais démonter, écraser ni percer la batterie.
- Ne la jetez pas dans un feu.
- Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne l'incinérerez pas.

votre produit


Contenu de la boîte

- 1 embellisseur de pieds
- 1 rouleau à grains fins
- 1 rouleau à grains épais
- 1 capot de protection
- 1 brosse de nettoyage
- 1 adaptateur secteur

Caractéristiques techniques



- Adaptateur secteur :
 - Modèle : CL201
 - Entrée : 230 V~ 50 Hz
 - Sortie : 3 V === 300 mA
- Bouton marche/arrêt
- Autonomie : 40 minutes
- Livré avec 1 rouleau à grains fins pour la totalité du pied, 1 rouleau à grains épais pour les callosités, 1 capot de protection et 1 brosse de nettoyage
- Rotation des rouleaux à 360°
- Temps de charge préconisé : 8h

Description de l'appareil

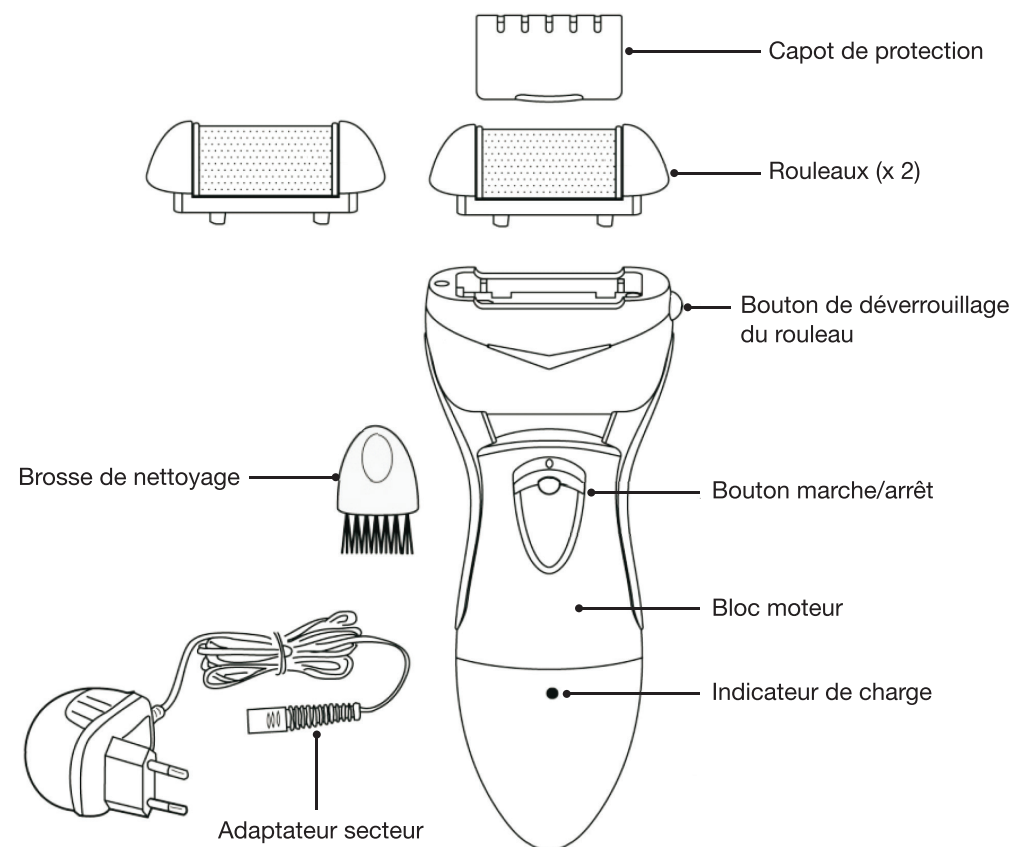

mise en charge de l'appareil

Avant la première utilisation, la batterie doit être rechargée complètement.

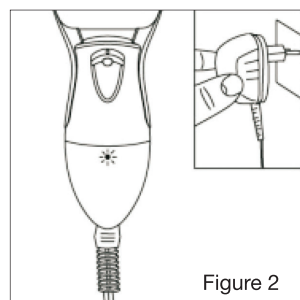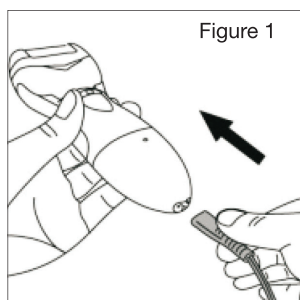

1. Poussez le bouton marche/arrêt vers le haut (marche).
2. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation secteur.
3. Insérez la fiche du cordon d'alimentation dans l'emplacement prévu à cet effet sous l'appareil (voir figure 1).
4. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale. Le voyant de charge s'allume en rouge pendant la charge (voir figure 2).
5. Laissez l'appareil en charge pendant 8 heures. Le voyant de charge reste allumé en rouge même après un charge complète de 8h.
6. Lorsque la charge est terminée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.





- Lors de la première mise en charge ou lorsque l'appareil n'a pas été utilisé pendant plusieurs mois, le temps de charge sera plus long.
- Pour préserver la durée de vie de votre batterie, nous vous recommandons d'utiliser l'appareil jusqu'à son déchargement complet avant de recharger la batterie.

Une **charge complète** dure **environ 8 heures** et vous offre une **autonomie** de fonctionnement d'environ **40 minutes**.

utilisation de l'appareil

Changement du rouleau




Pour changer le rouleau sur le bloc moteur :

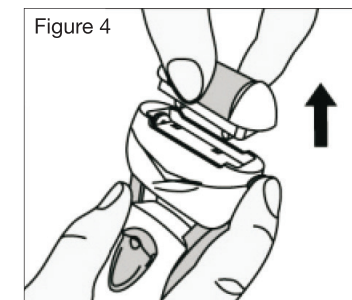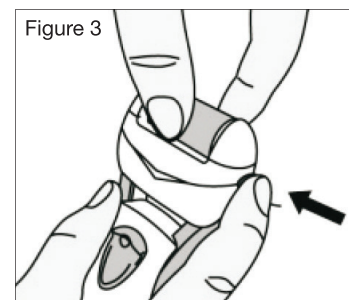

1. Assurez-vous que l'appareil est débranché et que le bouton marche/arrêt est sur la position « 0 » (arrêt).
2. Ôtez le capot de protection du rouleau.
3. D'une main, maintenez appuyé le bouton de déverrouillage situé sur le côté de l'appareil tout en retirant le rouleau de l'autre main (voir figure 3).
4. Choisissez le rouleau de votre choix :
 - **Rouleau à grains fins** : pour les zones sensibles, lisses ou peu calleuses.
 - **Rouleau à grains épais** : pour les zones très calleuses.
5. Insérez le rouleau souhaité sur la tête de l'appareil jusqu'au clic de verrouillage (voir figure 4). L'appareil est prêt à fonctionner.

Utilisation

1. Assurez-vous que vos pieds sont propres et secs avant d'utiliser l'appareil : nettoyez vos pieds à l'eau chaude savonneuse, laissez-les tremper dans l'eau pendant environ 5 minutes et séchez-les complètement. N'utilisez pas de crème avant l'utilisation de l'appareil.
2. Ôtez le capot de protection et sélectionnez le rouleau en vous reportant à la section précédente (« Changement du rouleau »).
3. *[Facultatif]* Pour une utilisation directe sur secteur : déroulez entièrement le cordon d'alimentation, insérez l'extrémité du cordon à l'emplacement prévu à cet effet sous l'appareil (voir figure 1) et branchez l'autre extrémité sur une prise de courant.
4. Poussez le bouton marche/arrêt vers le bas (arrêt) (voir figure 5).

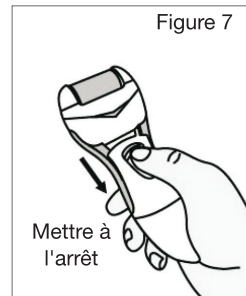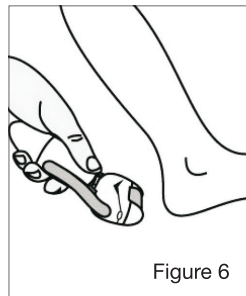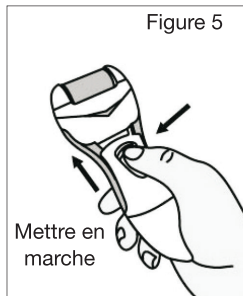

5. Passez l'appareil lentement d'avant en arrière sur vos callosités en le positionnant à 90° par rapport à la zone à poncer. Orientez l'appareil dans plusieurs directions sur les callosités pour un résultat optimal (voir figure 6).

Notes :

- N'appuyez pas trop fort sur la zone à poncer au risque d'arrêter l'appareil.
 - Interrompez le ponçage en cas d'inflammation ou de douleur.
 - Ne poncez pas la même zone pendant plus de 3 secondes.
6. Lorsque vous avez obtenu le résultat de ponçage désiré, poussez le bouton marche/arrêt vers le bas (arrêt) (voir figure 7) et, le cas échéant, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et de l'appareil.
7. Rincez vos pieds à l'eau tiède ou utilisez une serviette douce pour éliminer les peaux mortes, puis passez une crème hydratante si vous le souhaitez.
8. Nettoyez l'appareil immédiatement après utilisation.



nettoyage et entretien

Pour une performance d'utilisation et des résultats optimaux, il est nécessaire de nettoyer l'appareil et les rouleaux après chaque utilisation.

Nettoyage

Attention !

- Éteignez l'appareil et, le cas échéant, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et de l'appareil avant de procéder au nettoyage et à l'entretien de l'appareil.
- N'immergez jamais l'appareil, le bloc moteur ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.

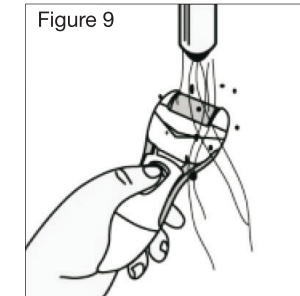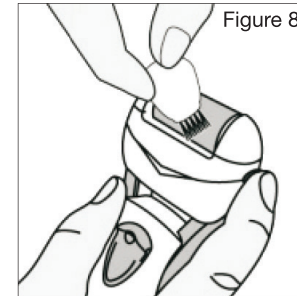

1. Nettoyez le bloc moteur à l'aide d'un chiffon doux et sec.
2. Nettoyez les rouleaux après chaque utilisation à l'aide de la brosse (fournie) pour enlever les résidus (voir figure 8). Vous pouvez également les nettoyer en les passant sous un filet d'eau en veillant à ne pas immerger le bloc moteur (voir figure 9). Séchez complètement les rouleaux avant de les replacer sur l'appareil.
3. Placez le capot de protection sur le rouleau avant de ranger l'appareil.
4. Entreposez l'appareil dans un endroit frais et sec lorsque vous ne l'utilisez pas.

Remplacement des rouleaux

Selon la fréquence d'utilisation et lorsque l'usure des rouleaux est apparente, vous pouvez procéder à leur remplacement. Pour cela, rendez-vous dans votre magasin revendeur afin de vous procurer les recharges adaptées à votre modèle : EPP 1 Rita, ref. 8001067.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Embellisseur de pieds

EPP 1 RITA



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



essentiel 

Service Clientèle
CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN

Art. 8001030
Réf. EPP 1 RITA
FABRIQUÉ EN R.P.C
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie

